



## 1. Test-Methode & Anwendungsgebiet

Epigenetischer Test zur Detektion des Endometriumkarzinoms bei peri- bzw. postmenopausalen Frauen mit abnormaler Blutung, mit deutlicher Reduktion der falsch-positiv Rate gegenüber Sonografie.

## 2. Material


- Probengefäße: Copan MSwab® (oder eNAT®)
- Abnahmestäbchen: Copan regular oder L-shaped FLOQSwabs®

## 3. Vorbereitung der Patientin

- Das Vorhandensein von Blut bzw. Zelldetritus in der Vagina interferiert nicht mit dem WID®-easy-Test und es braucht dementsprechend kein vorheriges Abtupfen von Blut, Schleim oder Zelldetritus!
- Die Probennahme für den WID®-easy Test soll vor anderen Probenahmen (z.B. PAP-Abstrich) oder Untersuchungen (z.B. Transvaginaler Ultraschall) erfolgen.

## 4. Probennahme

1. Beschriften Sie bitte ein Proben-Gefäß (Namen & Geburtsdatum) und füllen einen Anforderungsbeleg aus.
2. Gebärmutterhals & hintere Scheidengewölbe sichtbar machen (Spekulum ohne/nur wenig Gleitmittel).
3. Das Abnahmestäbchen in den oberen Scheidenbereich, nahe der Zervix einführen (siehe Graphik 1).
4. Abnahmestäbchen in dieser Position halten und langsam (2-3 Sekunden lang) einmal um 360° Grad drehen.
5. Anschließend Abnahmestäbchen in das hintere Scheidengewölbe einführen, wie in Graphik 2 dargestellt.
6. Auch hier das Abnahmestäbchen in Position halten und langsam (2-3 Sekunden) um 360° Grad drehen.

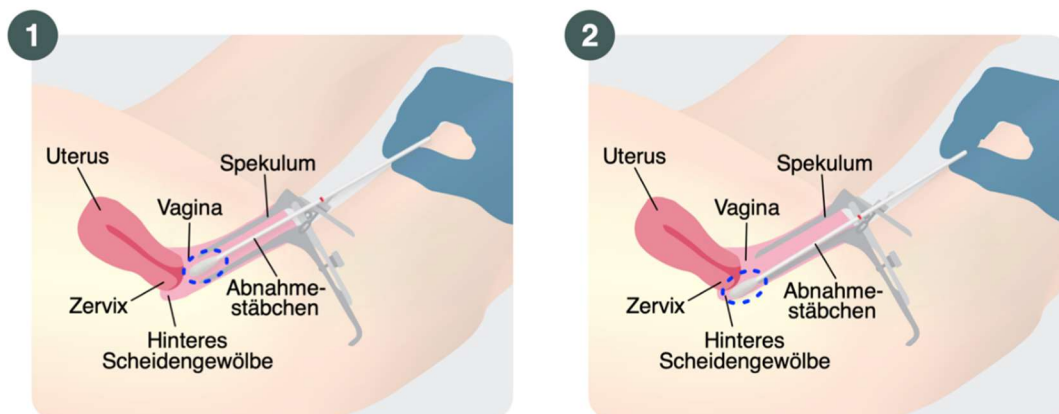

Optimale Positionen für die Probennahme: Graphik 1: Im oberen Scheidenbereich und Graphik 2: Im Bereich des hinteren Scheidengewölbes.

7. Das FLOQSwab® in das Probenröhrchen überführen, mit Hilfe der Röhrchenkante, vom Gesicht fern halten, an der rot markierten Sollbruchstelle abbrechen und Deckel aufschrauben.
8. Das Probenröhrchen durch 10x überkopf-Drehung schütteln & bei Raumtemperatur (2-25°C) lagern.





## 5. Patientinnendaten (Überweisungsschein)

Am **Überweisungsschein** müssen folgende Daten vorhanden sein:

- PatientInnendaten: Familienname, Vorname & Geburtsdatum Wohnadresse der Patientin.
- Versicherungsdaten: V.-Nummer und V.-Träger der versicherten Person.
  - Bei Mitversicherten sind die Daten der versicherten Person anzugeben.
- ZuweiserInnen-Daten: Praxis-Anschrift, Stempel & Unterschrift.
- Genaue und **vollständige klinische Angaben sind für eine optimale Befundqualität von Bedeutung!** Wir bitten Sie daher gegebenen Falles Angaben zu allen am Anforderungsbeleg aufgelisteten Indikationen anzuführen!

## 6. Verpackungsanforderungen & Versand

Bei Bedarf stellen wir Ihnen jederzeit gerne Abnahmestäbchen und Probengefäße zu (siehe Kontakt Probenabholung & Logistik). Verpackungen für *freigestellte medizinische Proben* müssen aus drei Bestandteilen bestehen:

- Wasserdichtes Primärgefäß (Probenröhrchen).
- Wasserdichte **Sekundärverpackung mit Praxis-Bezeichnung** beschriftet (z.B. Kunststoffbeutel oder transparente Box).
- Einer ausreichend festen Außenverpackung (in der Regel Transportkoffer unseres Logistik Teams oder Umkarton bei Postversand).
- **Ein Anforderungsbeleg je Patientin**

## 7. Kriterien für Annahme und Zurückweisung von Proben

Bitte beachten Sie, dass wir ausschließlich Proben annehmen können die:

- Eindeutig identifizierbar sind.
- Einem Anforderungsbeleg zuordenbar sind.
- Im für die jeweilige Untersuchung zutreffenden Gebinde fixiert wurden.

Fehlende oder fehlerhafte Angaben am Anforderungsbeleg werden soweit möglich telefonisch nachgefordert bzw. richtiggestellt. Dadurch kann es allerdings zu Verzögerungen in der Bearbeitung kommen.

## 8. Preis und Abrechnung

Bitte die Patientinnen auf den Umstand hinweisen, dass es sich bei dem WID®-easy Test momentan um keine kassenärztliche Leistung handelt. Der Preis pro Test beträgt € 250,- und wird der Patientin direkt in Rechnung gestellt. Kosten für die postalische Probenzustellung und die ärztliche Behandlung sind nicht inkludiert bzw. werden nicht vom Labor getragen.

## 9. Kontakt & weitere Information

Weitere Information finden Sie online unter [www.sola-diagnostics.com](http://www.sola-diagnostics.com). Detaillierte Informationen zur Handhabung des Probennahmesystems können dem Beipackzettel der Firma *copan* entnommen werden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte gerne unter den folgenden Durchwahlen an uns:

**0043(0)5442/666 11**

Durchwahl – **260** Probenabholung & Logistik

Durchwahl – **210** Probenannahme & Vermittlung

